

Hug

移动辅助机器人 Hug



从床位向轮椅换位

这是辅助老年人的换位动作的机器人。使洗手换衣时的站立、从卧床到轮椅、轮椅到卫生间等的移动不再困难。Hug 支持对于还有些自己的脚力而因各种原因导致使用脚的机会减少的患者、借用自己的足力以最小限度的护理进行换位。



快速准备、无论何时都可利用

因为不用吊带座、所以无需繁琐的准备工作。想使用的时候能立即使用。

对人温馨的自然站立

不仅是单纯地上升、而且一边将上半身向前滑一边站起来、可以把重心移动到脚底感觉舒适的站起来。Hug 的动作、将以前吊起式的升降机不能实现的、最大限度运用剩余足力变为可能。



不选出场地的小型设计

机器人的尺寸为 56cmx72cm、无需选择床尺寸和单人
间厕所等使用地方。

轻松愉快地换位、交流

「对不起，我很重」的担心换位的、因为将体力
劳动转换到机器人上了、可以轻松愉快地传达换
位的意思。

离开床位、在食堂与亲戚朋友一起一边聊天一边
吃饭、增加了享受兴趣爱好和娱乐的机会。







减轻护理人员腰的负担

因为将以前护理人员向上抱起的动作由
机器人进行、所以减轻了护理人员的身
体负担并且可以预防腰痛。



机型	Hug T1	
尺寸 (全长 × 全宽 × 全高)	723 × 562 × 995mm	
总重量 (包含电池)	65kg	
最大使用者体重	100kg	
电池	型 号	锂离子二次电池
	额定电压	DC24V
	充电时间	3.5 小时
	最大连续使用次数	200 次 (根据使用环境)
充电器	电源电压 频率	AC100V 50/60Hz
	消耗功率	待机 24W 充电时 75W 以下
噪音水准		65dB 以下
工作条件	温 度	0 ~ 40°C
	湿 度	RH20 ~ 90%

※ 产品规格有不经预告直接更改的情况

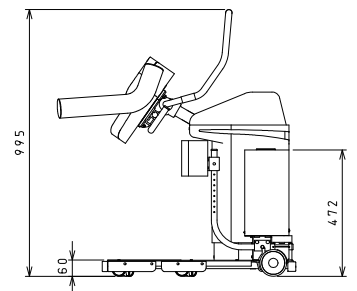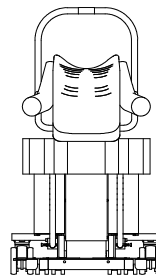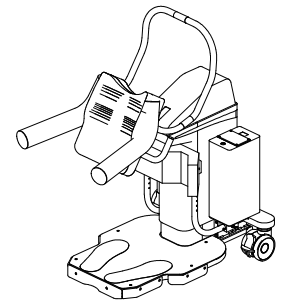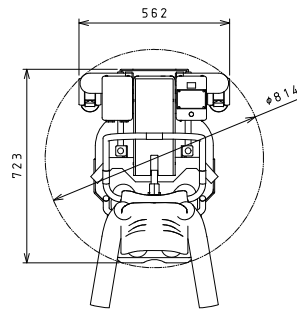

有关产品的信息和垂询

株式会社 F U J I

邮编 472-8686 爱知县知立市山町茶碓山 19 号
<http://www.fuji.co.jp>

TEL +81 566 55 8800

tdrobot@fuji.co.jp